


Jak vypadá test?

Systém Evalyn®Brush je přibližně 18 cm dlouhý a má podobu průhledného pouzdra s křídélky. V pouzdře se nachází růžová tyčinka s růžovým pístem na jedné straně a bílým kartáčkem na straně druhé.

Na konci s kartáčkem lze na pouzdro nacvaknout růžový kryt. Po sejmutí krytu, můžete zatlačením růžového pístu směrem k průhlednému pouzdru vytlačit z pouzdra bílý kartáček.

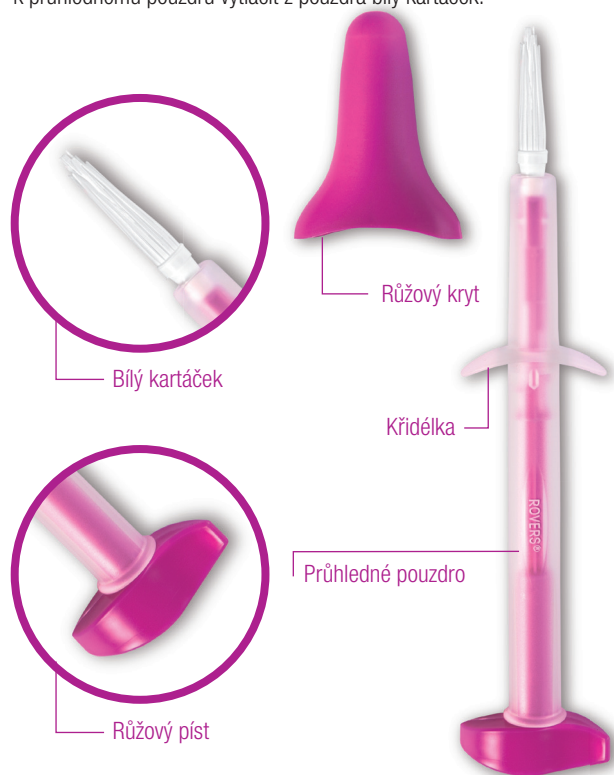

Proč použít systém Evalyn®Brush?

Evalyn®Brush je systém vyvinutý speciálně pro odebrání buněčného materiálu z vagíny. Evalyn®Brush je opatřen kartáčkem s jemnými štětkami. To zajišťuje, že bude odebrán dostatek buněčného materiálu.

Rovers Medical Devices

Společnost Rovers Medical Devices se specializuje na vývoj zařízení pro odběr buněčných vzorků pro účely lékařského výzkumu. Bezpečnost a spolehlivost produktů je garantována roky zkušeností, které společnost Rovers Medical Devices získala při vývoji, výzkumu a výrobě širokého spektra produktů pro lékařský výzkum. Systém Rovers® Cervex Brush®, který je celosvětově známý díky inovativnímu výtěrovému tamponu, je součástí produktové řady Rovers Medical Devices.

Distributor: I.T.A. - Intertact s.r.o.
Černokostecká 616/143, Praha 10, 108 00
Tel: +420 234 760 832
E-mail: obchod@ita-intertact.com

ŠARŽE: 38KKK
EXPIRACE: 31.08.2021

Verze Evafd-2018-11-CS

Pokyny pro domácí test



Výrobce: Rovers Medical Devices B.V.
Lekstraat 10, 5347 KV Oss, Holandsko
T +31 (0)412 648 870
F +31 (0)412 623 835
info@roversmedicaldevices.com
www.roversmedicaldevices.com

Rovers® Evalyn®Brush je patentovaný výrobek s registrovaným designem.

Rovers® a Evalyn® jsou registrované obchodní značky společnosti Rovers Medical Devices B.V. Oss, Holandsko.
© Rovers Medical Devices B.V.

CE 0044

STERILE EO



Rovers® Medical Devices

The Evalyn®Brush

Evalyn®Brush je sterilní systém, který umožňuje provedení testu doma. Pomocí systému Evalyn®Brush můžete odebrat buněčný materiál z vagíny snadno a bezbolestně. Tento buněčný materiál pak bude analyzován v profesionální laboratoři.

Důležitá upozornění


- Pokud je obal systému Evalyn®Brush poškozený nebo uplynulo datum expirace, systém nepoužívejte.
- Nepoužívejte v průběhu menstruace.
- Nepoužívejte systém v průběhu těhotenství nebo 3 měsíce po těhotenství.
- Alespoň 2 dny před použitím systému Evalyn®Brush nepoužívejte žádné jiné vaginální produkty. Vaginální antikoncepci, kondomy a lubrikanty na bázi vody lze používat normálně.
- Určeno k jednorázovému použití.
- Opakované použití může vést k rozvinutí infekce a/nebo stanovení nesprávné diagnózy.

Jednoduchý, bezpečný a spolehlivý


Tyto pokyny platí pro použití systému Evalyn®Brush.




1. Před použitím systému si umyjte ruce.

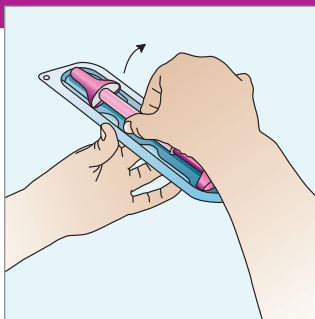


2. Vyměte systém Evalyn®Brush z obalu. Obal nevyhazujte, protože jej po použití budete potřebovat pro odeslání systému Evalyn®Brush do laboratoře.

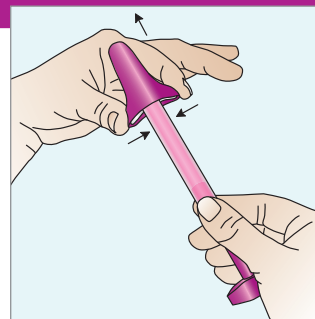


3. Pomocí palce a ukazováčku stlačte po stranách růžový kryt a sejměte jej ze systému Evalyn®Brush. Dbejte na to, abyste se nedotkli bílých vláken systému Evalyn®Brush rukama!

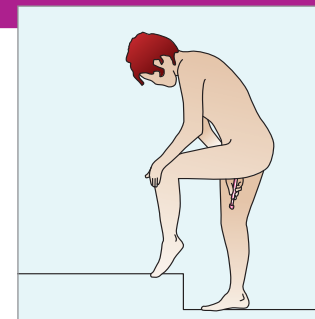


4. Odběr vzorku se provádí v pozici ve stoje. Zaujměte pohodlný postoj (např. jako při zavádění tampónu).

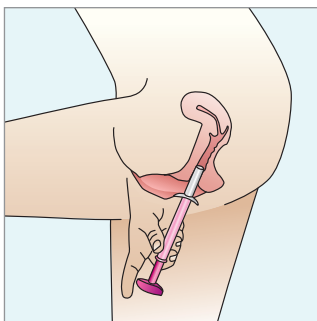


5. Jednou rukou roztáhněte stydké pysky a druhou rukou zasouvejte systém Evalyn®Brush do vagíny, dokud se křídélka nedotknou stydkých pysků.

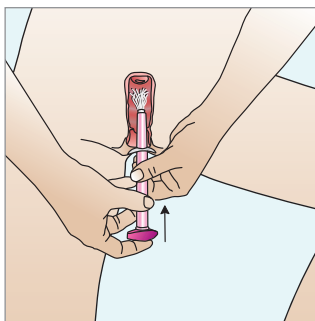


6. Jednou rukou přidržíte průhledné pouzdro a druhou rukou zatlačte růžový píst ve směru průhledného pouzdra. Jakmile se růžový píst ocitne u pouzdra a kartáček dosáhne správné pozice, uslyšíte a ucítíte cvaknutí.

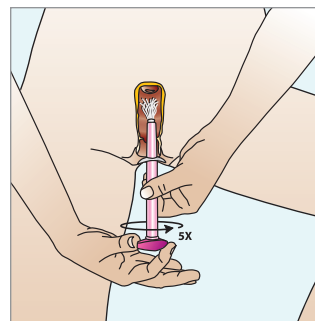


7. 5x otočte růžový píst ve stejném směru. Po každém otočení uslyšíte cvaknutí. Můžete tak snadněji počítat otočky. Po pátém otočení pístu opatrně systém Evalyn®Brush vyjměte.

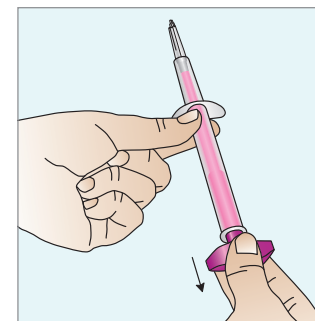


8. Jednou rukou přidržíte průhledné pouzdro a druhou rukou tahejte za růžový píst, dokud bílý kartáček nezmizí v pouzdře. Při tomto úkonu se nedotýkejte horní části systému Evalyn®Brush nad křídélky.

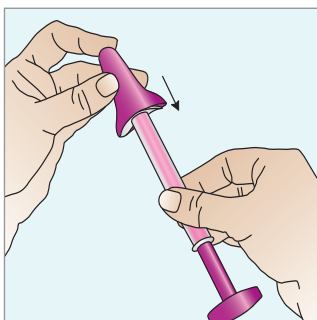


9. Přidržíte průhledný konec, aby bylo zajištěno, že se kartáček znovu nevysune. Pomocí palce a ukazováčku umístěte zpět na systém Evalyn®Brush růžový kryt. Jakmile dosedne na správné místo, uslyšíte cvaknutí.

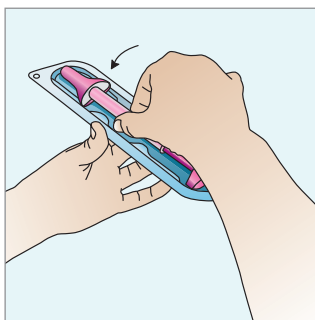

10. Vraťte systém Evalyn®Brush zpátky do obalu.

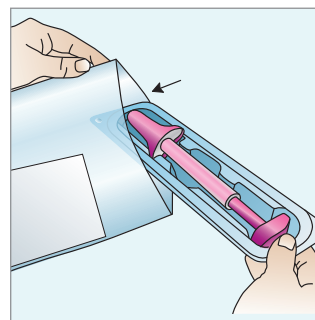

11. Obal se systémem Evalyn®Brush vložte do dodaného plastového sáčku a utěsněte jej.

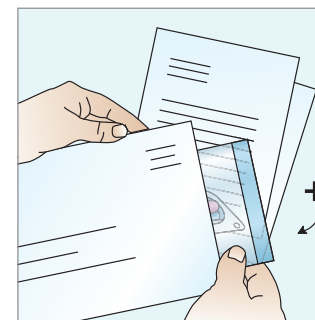

12. Plastový sáček obsahující systém Evalyn® Brush společně s ostatními požadovanými informacemi odešlete zpět v přiložené obálce.